

ENM-213 MEDYCZNY JEDNORAZOWY FARTUCH IZOLACYJNY



Niestrzępiący się. Nie
zawiera lateksu. Odporny
na działanie cieczy.
Łatwość manewrowania.
Antystatyczny. Niepalny.

Medyczny jednorazowy fartuch izolacyjny ENM-213 przeznaczony do ochrony użytkownika przed rozpyloną cieczą niestanowiącą istotnego zagrożenia. Fartuchy izolacyjne (NIESTERYLNE) zostały zaprojektowane w celu ochrony pracowników służby zdrowia i pacjentów przed przenoszeniem zakażeń. Dzięki barierze chroniącej przed cieczą fartuchy zapewniają bezpieczeństwo przy jednoczesnym zwiększonym poziomie komfortu.

Specyfikacja

Materiał	:	Tkaniny polipropylenowe i	Kolor	:	Żółty
Waga tkaniny	:	polietylenowe	Poziom	:	Poziom I, Poziom II, Poziom III, Poziom IV
		40 GSM			

ENM-213 MEDYCZNY JEDNORAZOWY FARTUCH IZOLACYJNY

Wymiarowanie

Rozmiar	Wysokość	Klatka piersiowa
S	120cm	73,5cm
M	123cm	75,5cm
L	126cm	77,5cm
XL	130cm	77,5cm
2XL	133cm	79,5cm



Komfort i ochrona

TS EN 13795-1
TS EN ISO 14791
TS EN ISO 15223-1
TS EN ISO 10993-1



	NIE UŻYWAĆ PONOWNIE		NIE WTBIELAĆ
	NIE PRASOWAĆ		OSTRZEŻENIE
	PRODUKT ŁATWOPALNY TRZYMAĆ DALA OD ISKIER I PŁOMIENI		NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
	NIE PRAC PRANIE WPŁYWA NA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE		NIE SUSZYĆ W PRALCE

Przechowywanie i utylizacja

- Przechowywać w suchych i czystych warunkach, w oryginalnym opakowaniu, z dala bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł wysokiej temperatury i oparów rozpuszczalników
- Przechowywać w temperaturze od -5°C do +45°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej minimum 40%, maksimum 80% Rh.
- Przewidywany okres trwałości wynosi pięć lat od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania zgodnie z instrukcją
- Wymienić odzież w przypadku jej uszkodzenia lub silnego zanieczyszczenia bądź też zgodnie z lokalnymi przepisami lub praktyką zawodową
- Produkt zatwierdzony przez CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych, kategoria I
- Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych klasy I

Ostrzeżenia i ograniczenia

Przed użyciem przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje obsługi oraz upewnić się, że produkt ten jest odpowiedni do danego zastosowania i że został prawidłowo założony. Produkt nie może być zmieniany ani modyfikowany. Przed użyciem należy sprawdzić, czy odzież nie ma żadnych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jej funkcję ochronną. Wymienić uszkodzoną odzież. Przy zdejmowaniu skażonej odzieży należy zachować ostrożność, aby nie skażać użytkownika niebezpiecznymi substancjami. Jeżeli odzież jest skażona, przed jej zdjęciem należy przeprowadzić procedury dekontaminacji. Noszenie odzieży ochronnej może spowodować stres cieplny w przypadku braku uwzględnienia warunków środowiska pracy. Należy rozważyć zastosowanie odpowiedniego ubrania pod fartuchem, aby zminimalizować stres cieplny lub uszkodzenie ubrania.

Ostrzeżenia i ograniczenia

kontaktu z olejami ciężkimi, iskrami lub płomieniami, lub łatwopalnymi płynami; w środowisku o wysokim ryzyku mechanicznym (otarcia, rozdarcia, przecięcia)

Zastosowanie

- Szpitale
- Farmacja
- Laboratoria

ENM-213 MEDYCZNY JEDNORAZOWY FARTUCH IZOLACYJNY

Zastosowania i właściwości

Nieszkodliwe cząstki stałe Tak

Nieszkodliwe rozbryzgi cieczy Tak

Nieszkodliwy rozprysk cieczy Tak

Struga cieczy Nie

Kontakt / zanurzenie Nie

Gazy i opary Nie

Niebezpieczne pyły i włókna Tak

Kontakt z rozbryzgiem szkodliwej cieczy Tak, jeśli substancja chemiczna jest kompatybilna z materiałem ubrania

Kontakt z rozpyloną szkodliwą cieczą Tak, jeśli substancja chemiczna jest kompatybilna z materiałem ubrania

Kwasy/Zasady Tak, jeśli substancja chemiczna jest kompatybilna z materiałem ubrania

Rozpuszczalniki organiczne Tak, jeśli substancja chemiczna jest kompatybilna z materiałem ubrania


Ważne

Niniejszy przewodnik stanowi jedynie zarys najważniejszych informacji. Nie powinien być zatem stosowany jako jedyne kryterium przy wyborze odzieży ochronnej. Przed użyciem jakiegokolwiek odzieży ochronnej, użytkownik musi przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi każdego produktu. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. W razie wątpliwości należy zwrócić się do specjalisty ds. bezpieczeństwa. Wybór najbardziej odpowiedniego środka ochrony osobistej będzie zależeć od konkretnej sytuacji i powinien być dokonany wyłącznie przez kompetentną osobę znającą rzeczywiste warunki pracy i ograniczenia samych środków. Ostateczne określenie przydatności tych produktów dla konkretnej sytuacji należy do obowiązków pracodawcy. Powyższe informacje mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania należy zawsze przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi dołączonych do fartucha izolacyjnego. W razie pytań należy skontaktować się z serwisem technicznym Drive1 MED Poland.

OGRA NICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, Drive1 MED Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikające ze sprzedaży, użytkowania lub niewłaściwego wykorzystania produktów Drive1 MED Poland bądź też niemożności ich użytkowania przez użytkownika.

Podręcznik użytkownika

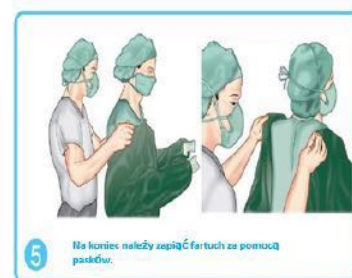

UWAGA
1. Produkt jednorazowy. Nie należy używać ponownie.